



JOYCEeasy

... le bon choix en nasal ou bucco-nasal.
Pour vous faciliter la vie.

Le choix du masque est capital pour le succès du traitement ventilatoire. JOYCEeasy est discret mais solide et la fixation ainsi que le réglage de ses éléments sont spécialement conçus pour une manipulation des plus simples.

Manipulation aisée et intuitive

Facile à ajuster directement sur le patient car intuitif, simple à manipuler et confortable à porter, JOYCEeasy nasal ou bucco-nasal accompagne efficacement vos patients tout au long de leur thérapie.

Excellente observance du patient

JOYCEeasy améliore l'observance et donc l'efficacité thérapeutique. Les tests effectués sur de nombreux patients ont permis d'optimiser la mise en place et la stabilité du masque sur le visage en réduisant les risques de fuite non intentionnelle et les points de pression sensibles.

Confort inégalé

La jupe et le coussinet frontal de JOYCEeasy sont recouverts du revêtement WEINMANN SilkTec. Son toucher soyeux apporte une incroyable sensation de velours sur la peau et un confort absolu.

Simple d'utilisation

- Facile à mettre en place et à enlever
- Attache du harnais par simple clic 4
- Réglage des tailles encore plus précis
- Code couleur des bandes auto-agrippantes et des faces interne et externe pour une plus grande facilité du remontage du harnais 5

Confort d'exception



- Coussinet frontal et jupe en contact avec le visage revêtus du matériau WEINMANN SilkTec pour un confort inégalé. 1
- La rotule 360° - 3D du système expiratoire permet une mobilité multidirectionnelle du circuit patient. 6
- Système expiratoire très silencieux 7
- Sangle transversale réglable pour éviter tout glissement sur la nuque 8
- Large et doux autour de la racine du nez 1

Discret, léger mais sûr et solide

- Forme anatomique optimisée pour réduire les fuites et les points de pression sensibles à leur minimum
- Boucle attache-tuyau pour un maintien du circuit au dessus de la tête du patient
- Structure en polyamide pour une solidité à toute épreuve
- Sangle d'ouverture rapide (seulement Full Face) 9



JOYCEeasy
Masque nasal et bucco-nasal

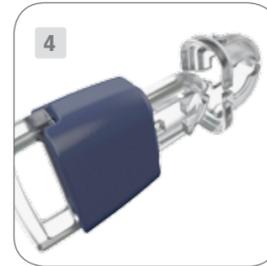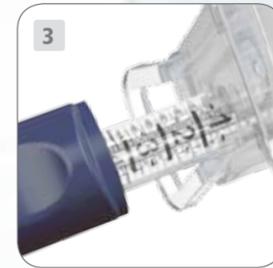

- 1 Jupe du masque
- 2 Coussinet frontal
- 3 Réglage de la cale frontale
- 4 Clip d'attache
- 5 Bandes auto-agrippantes
- 6 Rotule 360° - 3D
- 7 Fuite intentionnelle
- 8 Sangle transversale
- 9 Sangle d'ouverture rapide (Full Face)
- 10 Raccord de prise de pression



JOYCEeasy
Masque nasal





JOYCEeasy Full Face
Masque bucco-nasal

Full Face

Interface patient / JOYCEeasy

Références WM

Désignation	Référence WM taille S	Référence WM taille M	Référence WM taille L
JOYCEeasy Nasal	WM 25510	WM 25520	WM 25530
JOYCEeasy Full Face	WM 25910	WM 25920	WM 25930

Pièces de rechange

Harnais

clips d'attache inclus
WM 25505
(nasal et bucco-nasal)



Coussinet frontal

en silicone,
avec revêtement
WEINMANN SilkTec
WM 26801
(nasal et bucco-nasal)



Bouchon pour raccord de prise de pression

WM 26849
(nasal et bucco-nasal)



Douille rotative

WM 26846 (Nasal)
WM 26847 (Full Face)



Kit rotule articulée (Nasal)

anneau de sécurité,
raccord coudé,
douille rotative
WM 15798



Kit rotule articulée (Full Face)

anneau de sécurité,
raccord coudé,
valve d'expiration d'urgence,
douille rotative
WM 15897



Boucle d'attache du tuyau

WM 26774
(nasal et bucco-nasal)



Clips d'attache

2 unités
WM 26848
(nasal et bucco-nasal)



Cale frontale

y compris coussinet frontal en silicone,
avec revêtement WEINMANN SilkTec
WM 15797
(nasal et bucco-nasal)



Jupe du masque

en silicone, avec
revêtement WEINMANN SilkTec
taille S WM 26803 (Nasal)
WM 26853 (Full Face)
taille M WM 26813 (Nasal)
WM 26863 (Full Face)
taille L WM 26823 (Nasal)
WM 26873 (Full Face)



Sangle d'ouverture rapide

WM 26890
(Full Face)



Sachet tissu

WM 26295
(nasal et bucco-nasal)



Retrouvez notre gamme complète de solutions, interfaces patient et accessoires sur le site : weinmann.de

Caractéristiques techniques JOYCEeasy

	Masque nasal		Masque bucco-nasal		Résistance à l'écoulement valve d'expiration d'urgence inspiration pour 50 l/min : expiration pour 50 l/min :	Pression à la valve d'expiration d'urgence ■ ouverte : ■ fermée :	Déclaration des valeurs d'émission sonore selon ISO 4871 ■ pression acoustique : ■ puissance acoustique : ■ facteur d'incertitude :	Durée d'utilisation	Normes appliquées
	Masque nasal	Masque bucco-nasal	Masque nasal	Masque bucco-nasal					
Classe de produit selon 93/42/CEE*	II a								
Dimensions (l x h x p)	env. 80 x 130 x 90 mm ¹	env. 120 x 150 x 110 mm ¹							
Poids	env. 72 g ¹	env. 103 g ¹							
Plage de pression thérapeutique	de 4 hPa à 30 hPa								
Raccord circuit patient (raccord conique selon EN ISO 5356-1)	Ø 22 mm (mâle)								
Raccord de prise de pression	Ø 4 mm								
Températures limites ■ en fonctionnement : ■ stockage :	de +5° C à +40° C de -20° C à +70° C								
Résistance à l'écoulement ■ pour 50 l/min : ■ pour 100 l/min :	0,16 hPa 0,64 hPa	0,13 hPa 0,53 hPa							

MENTIONS LEGALES* :
Fabricant : Weinmann
Classe DM : Classe IIa
Organisme notificateur : TÜV - Rheinland LGA Products GmbH, Nuremberg - Allemagne
Remboursé dans le cadre des LPP : 1188684 Pression Positive Continue pour le traitement de l'apnée du sommeil (Forfait 9) et des LPP de ventilation assistée
Lire attentivement les instructions contenues dans les notices des produits concernés avant toute utilisation.

¹ Selon la taille et le modèle
² Les matériaux utilisés dans la fabrication des masques ont tendance à s'user plus rapidement s'ils sont nettoyés avec des détergents agressifs. Il est donc parfois nécessaire de changer certaines pièces avant la date indiquée.

83650-FR-11/2012 Document destiné aux professionnels de santé et prestataires de santé à domicile.
© Tous droits réservés. Toute reproduction est soumise à autorisation préalable et expresse de la société Weinmann.
Sous réserve d'éventuelles erreurs d'impression.



JOYCEeasy

Génialement simple et tout simplement génial